



Pilly SMS

Brukerinformasjon

Pilly SMS

Om produktet

Pilly SMS er en automatisk medisindispenser som sørger for at du får rett medisin til rett tid. Pilly SMS varsler når en medisindose skal tas.

Denne brukerinformasjonen skal hjelpe deg å bli kjent med produktet og vil ta for seg hvordan produktet brukes.

Hensikt

Ved å bruke Pilly SMS får du tatt medisinene dine til rett tid uten bekymring for at medisinen blir uteglemt eller tatt feil.

Hvordan fungerer Pilly SMS?

Pilly SMS er en automatisk medisindosett med 28 doseringsrom som varsler deg ved å blinke og/eller gi lyd når medisinen skal tas.

Inni dispenserer er det et medisinbrett som roterer fram riktig dose til riktig tid.

For å ta medisinen snus dosetten opp ned og medisinen faller ned i hånden din. Dosetten er robust og lett å ta med hvor enn du måtte ønske å dra.

Dosetten kan stilles inn til å gi medisin en eller flere ganger om dagen. Det er hjemmesykepleien som setter disse innstillingene i følge din

Hva skjer om jeg ikke husker å ta medisinen min?

Hvis du ikke har tatt medisinene dine i løpet av den tiden Pilly SMS er satt til å varsle, så vil dosetten sende en melding til hjemmesykepleien (eller til pårørende) som sier at du ikke har tatt medisinene dine. Da vil de ta kontakt med deg for å minne deg på å ta medisinen.



Hvilken opplæring får jeg?

Hjemmesykepleien vil gi deg egen opplæring i bruk av Pilly SMS. Du vil lære hvordan du skal ta medisinen din, og du vil bli vist hvordan Pilly SMS fungerer. Du vil også få opplæring i hvordan du kan ta medisinen din før den angitte tiden, og hvordan du kan bruke medisindispenseren slik det er best for nettopp deg.




Ekstraustyr

Tippe, f.eks for de med nedsatt funksjon i armer, eller nedsatt syn.



Hvordan ta medisinen

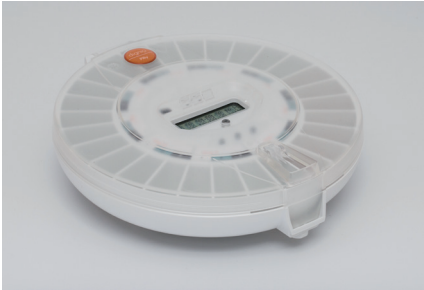

01

Når det er tid for å ta medisinen varsler Pilly SMS med lys og/eller lyd.



02

Snu Pilly SMS opp ned, og tøm medisinen i hånden.



03

Sjekk at dosekammeret er tomt for medisiner.


Forhåndsutmating fra Pilly SMS

(Gjelder der Pilly SMS er stilt inn med forhåndsutmating)



01

Pilly SMS vendes rolig opp ned 2 ganger. Det skal komme kvitteringslyd for begge vendingene.

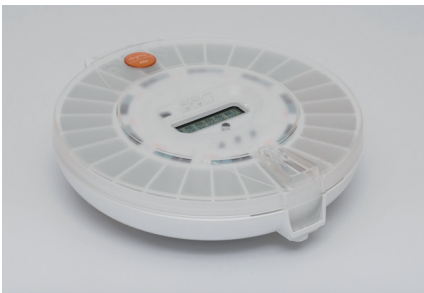

02

Pilly SMS vil så varsle med lys og/eller lyd på vanlig måte.



03

Snu Pilly SMS opp ned, og tøm medisinen i hånden.

Sjekk at dosekammeret er tomt for medisiner.

Nyttig informasjon

Teknisk data om dispenseren

Dimensjoner: diameter 190mm og høyde 56mm

Vekt: 390 gram eller 490 gram med batterier

Volum: Omtrent 10ml per doseringsrom

Batterier: 6V (4x1.5V AA Alkaline batterier)

Rengjøring

Pilly SMS kan vaskes over med en lett fuktig klut.

Medisinbrettet kan vaskes i varmt vann eller i vaskemaskinen (Høyeste temperatur er 50 grader).

Statussjekker

Status på dosene



1. Tipp dispenseren omtrent 30 grader med fronten vendt mot deg.

NEXT

2. Skjermen skal da vise en skiftende informasjon over skjermen med neste dose, hvor mange doser som er igjen og batterinivået.

Feilkoder

1 : ERR 01 :

Dispenseren er blitt forhindret fra å rotere for å lukke et rom i medisinbrettet. Dette kan være fordi noe sperrer for medisinbrettet, fordi tannhjulet ikke har kontakt med medisinbrettet eller fordi det er noe galt med sensoren som sørger for at medisinbrettet er riktig justert.

2 : ERR 04 :

Dispenseren er blitt forhindret i å rotere til neste dose.
Årsakene kan være de samme som beskrevet for ERR 01.

3 : ERR 08 :

Dersom Pilly ligger opp ned, vil ikke en ny dose bli tilgjengelig før dispenseren snus rett vei. Om en eller flere hele varslingsperioder passerer, mens dispenseren ligger opp ned, vil dosene som ikke er tatt bli kjørt forbi når dispenseren blir satt rett vei. Hvis det ikke er flere doser igjen i dispenseren etter at dette har skjedd, utløses ERR 08.

4 : ERR 10 :

Dette er koden for batterifeil. Denne oppstår dersom batteriet er svært nært å være tomt, eller er satt i feil.

dignio

www.dignio.no