

Reisemodus

Informasjon til tjenestemottakere og pårørende

Man kan bestille medisiner fra dispenserens for å ta med seg på korte turer ut. Denne funksjonen kalles reisemodus.

Medisindispenseren deler ut én og én medisinpose av gangen og slipper dem ned på bordet. Dispenseren må derfor plasseres slik at posene ikke kan falle på gulvet.

Varsling på telefon- eller sms

Når dispenserens er satt i reisemodus kan du få påminnelser om medisintid via en automatisk oppringning på telefon, eller som sms. Kontakt hjemmetjenesten dersom du ønsker denne muligheten.

OBS! Ved uttak av mange doser

Ved aktivering av reisemodus leser dispenserens posene fram til tjenestemottaker kommer hjem, + de neste 3 posene, og deler deretter ut én og én pose. Trenger du å ha med deg mange doser kan dette ta lang tid, i tillegg til at det kan være upraktisk å ta med seg mange løse poser. Vi anbefaler derfor heller å ta kontakt med helsepersonell som kan komme til deg og ta ut en sammenhengende remse med medisiner for det aktuelle tidsrommet.

PS: Ved å ta ut medisiner til reise på denne måten, kan systemet ikke varsle tjenestemottaker om medisintid.

Det finnes to varianter av reisemodus; brukerstyrt og tilpasset. Har du fått tilgang til **brukerstyrt reisemodus**, har du alltid tilgang til knappen for Reisemodus på dispenserens skjerm. Har du **tilpasset reisemodus**, kan du bruke reisemodus på de tidene du har avtalt med din omsorgsorganisasjon.

1. Brukerstyrt reisemodus – slik gjør du:

1. Ta på skjermen for å aktivere den, og trykk på **Meny**- knappen.




2. Velg deretter **Medisinering**



3. Velg deretter **Reisemodus**



4. Medisindispenseren spør om du er sikker på at du vil ta ut medisin i reisemodus. Fortsett ved å trykke på **Godkjenn**, ev. **Avbryt** dersom du ombestemmer deg.

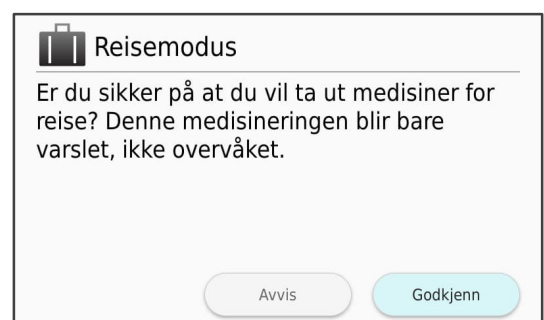


5. Velg hjemkomstdag.

Viktig! Ved uttak for flere dager:

Ettersom dispenseren skal sjekke informasjonen på alle posene og regne ut sikkerhetsvindu mellom doser, kan denne prosessen ta lang tid, avhengig av antall doser. I tillegg kan det være upraktisk for deg å ta med mange løse poser i stedet for en remse.


Vi anbefaler derfor at du heller kontakter helsepersonell for å få hjelp til å ta ut en sammenhengende remse med medisinerposer for det aktuelle tidsrommet.

PS: Valget av hjemkomstdag er sperret dersom det ikke er medisin i dispenseren for den dagen det gjelder. Tasten for valget er i tilfelle grå. Du kan avbryte aktivering av reisemodus ved å trykke på **Avbryt**.

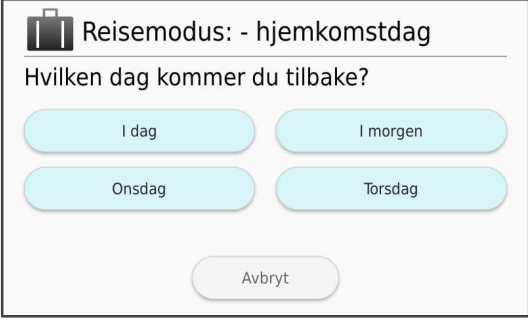


6. Legg inn tidspunktet for når du kommer hjem. Klokkeslettet endres med pluss (+) og minus (-)-tastene. Gå videre ved å trykke på **OK**.

Du kan gå tilbake til den forrige ruten ved å trykke på **Tilbake**, eller avbryte aktiveringen av reisemodus ved å trykke på **Avbryt**.

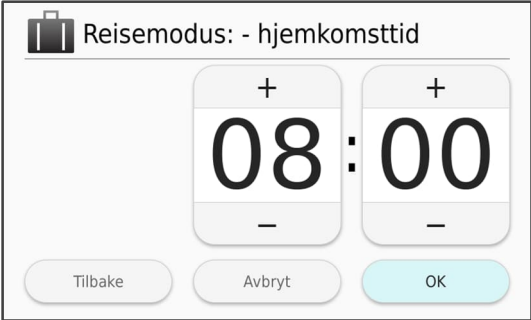

7. Bekreft til slutt tidspunktet for når du er tilbake. Trykk på **OK** dersom hjemkomsttiden er riktig. Du kan gå tilbake til den forrige ruten ved å trykke på **Tilbake**, eller avbryte aktiveringen av reisemodus ved å trykke på **Avbryt**.

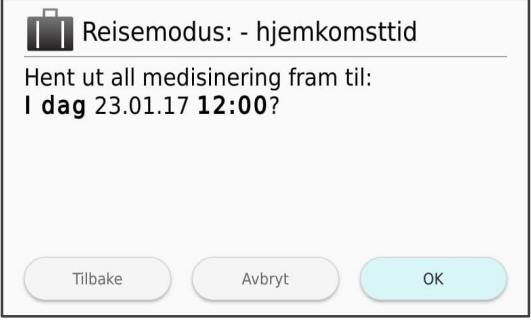

8. I reisemodus deler dispenseren ut medisinene i enkeltposer uten snitt for enkel åpning. Forsikre deg om at medisindispenseren er plassert slik at medisinposene ikke faller på gulvet når de deles ut.



Obs: Denne fasen kan ta tid hvis det er mange poser, ettersom dispenseren skal lese og verifisere informasjonen på alle posene.

9. Medisindispenseren melder fra når alle posene er delt ut.
10. Om ønskelig kan du få en påminnelse om medisintid i form av en oppringing eller tekstmelding til din eller pårørendes telefon.



11. Når reisemodus er aktivert, vises et bilde av en koffert på startskjermen på medisindispenseren. Dispenseren går automatisk tilbake til normal driftsmodus igjen på den oppgitte tiden for hjemkomst.



1. Tilpasset reisemodus – slik gjør du:


Ved start-tid gir dispenseren et lydsignal, og koffertsymbolet for Reisemodus dukker opp på skjermen.

Du får nå tilbud om å ta ut medisiner du kan ta med deg.



Hvis du vil starte utdelingen av medisiner trykker du **Ja**.


Om du ombestemmer deg kan du trykke **Nei**. Da går skjermen tilbake til normal visning som på bildet over. Koffert-symbolet til høyre for meny-knappen viser at det fortsatt er mulig å aktivere reisemodus.

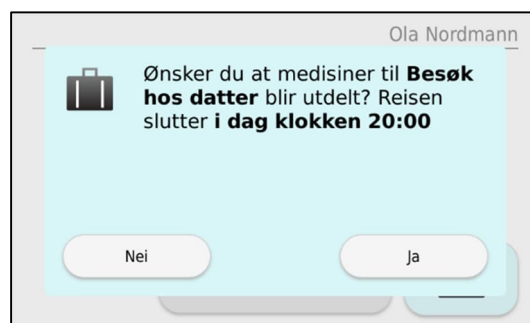

Trykker du **Ja**, får du opp en melding på skjermen som ber deg bekrefte at du ønsker å ta ut medisin til den avtale aktiviteten.

Trykk **OK** for å bekrefte, eller **Avbryt** dersom du har ombestemt deg.

Trykker du på **Tilbake** kommer du tilbake til hovedsiden.

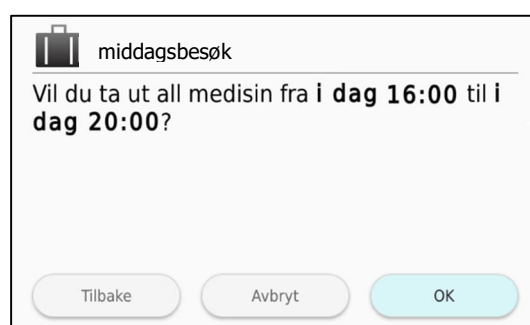

Dersom du ikke aktiverer reisemodus, vil dispenseren varsle og dele ut medisiner som vanlig.